

TH

คู่มือการใช้งาน

Sens 365 เว็บบ



คู่มือการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการใช้งานเว็บ Sens365 อย่างถูกต้อง
เว็บ Sens365 เชื่อมต่อกับผู้ใช้เซ็นเซอร์ของระบบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสอย่างต่อเนื่อง
CareSens Air (ระบบ CareSens Air CGM)
อ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามข้อควรระวังทั้งหมดก่อนใช้งาน

หมายเหตุ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บ Sens365
Sens365 เป็นโปรแกรมแสดงผลเสริมสำหรับระบบ CareSens Air CGM และไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา หรือใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพ Sens365 ไม่รับประกันว่าผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM จะได้รับ
ข้อมูลน้ำตาลกลูโคสแบบเรียลไทม์

สารบัญ

ก่อนใช้งาน	6
ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสาร	7
ข้อมูลด้านความปลอดภัย	9
1 ทำความเข้าใจเว็บ Sens365	11
กลไกการทำงาน.....	11
2 ข้อมูลจำเพาะของเว็บ Sens365 ที่แนะนำ.....	12
2.1 ระบบปฏิบัติการที่แนะนำ	12
3 การใช้เว็บ Sens365 (ผู้ใช้ทั่วไป).....	13
3.1 การใช้เว็บ Sens365	14
3.2 ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก	15
3.3 การดูรายงาน	17
ภาพรวม	18
AGP	21
การเปรียบเทียบ.....	22
รูปแบบ	23
แนวโน้ม.....	24
สถิติ.....	25
เหตุการณ์.....	26
3.4 การตั้งค่า.....	27
การเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์.....	27
การจัดการบัญชี i-SENS.....	28
การจัดการผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ.....	29
3.5 การเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ.....	30
การเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณกับพีซี.....	30
ทำความเข้าใจหน้าจอตัวรับสัญญาณ.....	31
การสำรวจฟังก์ชันตัวรับสัญญาณ	32

4	การใช้เว็บ Sens365	
	(ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ)	33
4.1	การเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ	34
	การยืนยันตัวตนของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ	34
4.2	ทำความเข้าใจหน้าจอผู้เชี่ยวชาญ	36
4.3	ทำความเข้าใจหน้าจอกลุ่ม	37
4.4	การจัดการกลุ่ม	38
	การเพิ่มกลุ่ม	38
	การเชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์	38
	การเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ	38
4.5	การดูรายงานผู้ใช้เซ็นเซอร์	39
4.6	การเลือกผู้ให้บริการ	40
	ภาคผนวก A นโยบายบัญชีที่ไม่ใช้งาน	41
	นโยบายบัญชีที่ Sens365 ไม่ใช้งาน	41
	การคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้เซ็นเซอร์	41
	ภาคผนวก B ข้อมูลทางเทคนิค	42
B.1	ประสิทธิภาพ	42
B.2	ความปลอดภัยทางไซเบอร์	43

ก่อนใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ยินยอมให้เก็บรวบรวมเท่านั้น
- ติดต่อผู้ผลิตหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำงานเปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สายแล้ว

หมายเหตุ

- มาตรฐานและข้อบังคับทั้งหมดที่ระบุจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกคู่มือนี้
- i-SENS, Inc. ได้จัดเตรียมข้อมูลในคู่มือนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม i-SENS ไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในคู่มือ ทั้งนี้ i-SENS อาจเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติ หรือการออกแบบของผลิตภัณฑ์
- เอกสารนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกหรือแก้ไขคู่มือนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก i-SENS โดยเด็ดขาด
- รูปภาพเป็นภาพตัวอย่างและมีไว้เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น หน้าจอและลักษณะของอุปกรณ์จริงอาจแตกต่างจากที่แสดงในคู่มือนี้

ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสาร

ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์

คู่มือนี้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่อไปนี้เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจเนื้อหา

ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์	คำอธิบาย
ตัวหนา	ตัวหนาใช้เพื่อแสดงองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก รวมทั้งเมนูและไคเรกทอรี
..	เครื่องหมายอัฒภาคเดียวใช้เพื่อระบุหน้า พอร์ทัล และหน้าจอกจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
'การอ้างอิงโยง'	'การอ้างอิงโยง' ใช้เพื่ออ้างอิงถึงส่วนต่างๆ ของเอกสารนี้
สื่อประกอบ	มีการใช้สื่อประกอบในรูปแบบกราฟิก ภาพประกอบ หรือการจับภาพหน้าจอเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความ
ตาราง	ตารางใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบที่อ่านง่าย

รายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติม

คุณสามารถอ้างอิงรายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติมเหล่านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องและข้อจำกัด

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้ระบุสถานการณ์อ้างอิงที่ควรทราบ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อความด้านความปลอดภัย

คู่มือนี้ใช้ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์:

คำเตือน

ข้อความนี้แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตหากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง

ข้อความนี้แสดงสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือมีความเสียหายต่อทรัพย์สินหากไม่หลีกเลี่ยง

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้วย

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	เครื่องหมาย CE
	ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในประชาคมยุโรป/สหภาพยุโรป
	อุปกรณ์ทางการแพทย์
	คำแนะนำการใช้หรือคำแนะนำในการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์
	ผู้ผลิต
	หมายเลขรุ่น
	ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อบ่งชี้ในการใช้

Sens365 ใช้สำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดอย่างต่อเนื่องโดยวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในช่องเหงือกระหว่างเซลล์ในบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป Sens365 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลน้ำตาลกลูโคสในอดีตจากอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสที่ทำงานร่วมกันได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ Sens365 มีให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (เว็บ Sens365) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ (แอป Sens365)

เว็บ Sens365 ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางคลินิก หรือใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนทำการตัดสินใจทางการแพทย์และปรับเปลี่ยนการรักษาใดๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพควรใช้ข้อมูลนี้ควบคู่กับข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่

แอป Sens365 เป็นโปรแกรมแสดงผลเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่บ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดูข้อมูลน้ำตาลกลูโคสของผู้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เข้ากันได้จากระยะไกล ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลในระดับรองเท่านั้น และไม่ควรคาดหวังให้สามารถสื่อสารและแสดงข้อมูลน้ำตาลกลูโคสแบบเรียลไทม์ได้

ข้อมูลผู้ใช้ที่สำคัญ

- คุณต้องสร้างบัญชี i-SENS เพื่อใช้ Sens365
- Sens365 เป็นโปรแกรมแสดงผลเสริมสำหรับระบบ CareSens Air CGM และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา หรือใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Sens365 ไม่รับประกันว่าผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM จะได้รับข้อมูลน้ำตาลกลูโคสแบบเรียลไทม์
- ต้องอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนและข้อควรระวังก่อนใช้งาน Sens365 รวมถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องใช้งาน Sens365 ให้สอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

คำเตือน

- ผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM และสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครองไม่ควรตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาโดยอาศัยข้อมูลน้ำตาลกลูโคสจาก Sens365 นอกจากนี้ Sens365 ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ และไม่ควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา
- สถาบันทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพควรใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Sens365 ร่วมกับข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ ที่มีเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือวิเคราะห์การรักษา

ข้อควรระวัง

- ผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM ต้องเปิดพีเจอาร์การแชร์เพื่อส่งข้อมูลน้ำตาลกลูโคสไปยังผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์) หากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพต้องการดูเนื้อหาที่แชร์ จะต้องดาวน์โหลด Sens365 และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM
- อุปกรณ์อัจฉริยะของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลที่ใช้ระบบ CareSens Air CGM แชร์ผ่านทาง Sens365
- หากอุปกรณ์อัจฉริยะของผู้ใช้ระบบ CareSens Air CGM หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์) ปิดอยู่ อยู่ในโหมดเครื่องบิน หรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจทำให้ไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลน้ำตาลกลูโคสได้
- ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์) ร่วมจัดการระบบ CareSens Air CGM กับผู้ใช้ได้ แต่ผู้ใช้เซ็นเซอร์จะต้องเป็นผู้ที่จัดการน้ำตาลกลูโคสด้วยตนเองเสมอ
- หากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์) ยุติการเชื่อมต่อ จะไม่สามารถดูเนื้อหาที่ใช้ระบบ CareSens Air CGM ส่งมาได้อีกต่อไป

1 ทำความเข้าใจเว็บ Sens365

กลไกการทำงาน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นซอฟต์แวร์การแสดงผลเสริมที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลน้ำตาลกลูโคสที่ประมวลผลแล้วด้วยระบบ CareSens Air CGM ของ i-SENS ระบบนี้สามารถส่งและแสดงผลข้อมูลบนอุปกรณ์อัจฉริยะระบบ Android และ iOS ได้ โดยสามารถส่งต่อข้อมูลน้ำตาลกลูโคสที่รวบรวมและประมวลผลโดยระบบ CareSens Air CGM ของ i-SENS ไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์) อย่างปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอลการเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL)

2 ข้อมูลจำเพาะของเว็บ Sens365 ที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเข้ากันได้โดยผู้ผลิต

2.1 ระบบปฏิบัติการที่แนะนำ



หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ระบบปฏิบัติการที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่แนะนำ ไม่รับประกันการทำงานที่ถูกต้องของเว็บ Sens365 สำหรับระบบปฏิบัติการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าเข้ากันได้

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ	ความละเอียด
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari	1280 x 800 px หรือสูงกว่า

OS (ระบบปฏิบัติการ)	เวอร์ชัน
Windows	10 ขึ้นไป
Mac OS	11 ขึ้นไป

3 การใช้เว็บ Sens365 (ผู้ใช้ทั่วไป)

คุณสามารถใช้เว็บ Sens365 และตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสที่อ่านได้ซึ่งวัดจากแอป CareSens Air หรือตัวรับสัญญาณได้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บ Sens365 การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ที่เว็บ Sens365 มีให้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโรคเบาหวาน

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณ:


1. เปิดใช้งานและเข้าสู่ระบบเว็บ Sens365
2. ดูและทำความเข้าใจรายงานน้ำตาลกลูโคส
3. แชร์ข้อมูลน้ำตาลกลูโคสของคุณกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญ
4. เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเพื่อดูข้อมูลของคุณ
5. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการบัญชี i-SENS โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

3.1 การใช้เว็บ Sens365

- 1 เปิดเบราว์เซอร์และป้อน URL ของเว็บ Sens365
URL: <https://sens365.com>
คลิกเริ่มต้นใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเว็บ Sens365

- 2 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี i-SENS ของคุณ

- โปรดสร้างบัญชี หากคุณยังไม่มี **คลิกสร้างบัญชี**และดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการยืนยันอีเมล ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็น ระบุประเทศที่อยู่อาศัย และข้อมูลผู้ใช้
- แม้ว่าจะเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียล แต่คุณก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี i-SENS ได้ ในกรณีนี้ โปรดเลือกการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลเดียวกันเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ
- หากลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ **ลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหม**

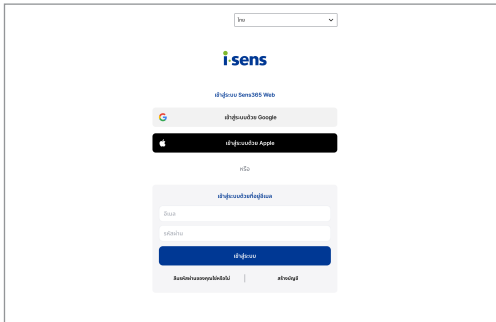


หมายเหตุ

เปลี่ยนภาษาที่มุมมองหน้า หากต้องการ

3.2 ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลพื้นฐานที่แสดง เมื่อคุณเข้าสู่หน้าจอหลักของเว็บ Sens365 บนเว็บหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

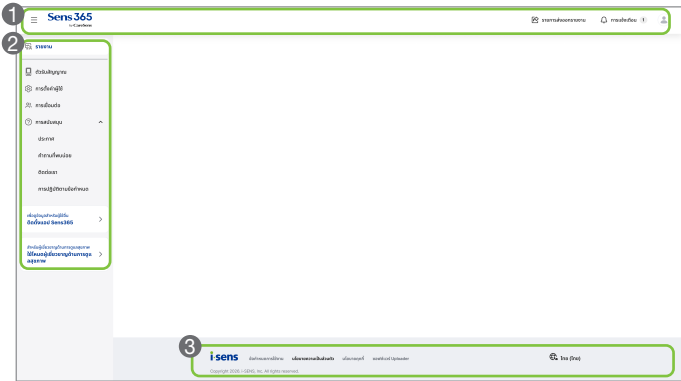

ข้อ	ชื่อ	คำอธิบาย
1	บริเวณด้านบน	• ทางลัดหน้าจอหลัก Sens365: ไปยังหน้าจอหลัก Sens365 • รายการส่งออกรายงาน: เพิ่มและจัดการรายงานในรายการส่งออก • การแจ้งเตือน: ตรวจสอบบันทึกการแจ้งเตือน เช่น รายการค่าเชิงุณและค่าประกาศต่างๆ • โปรไฟล์: ดูข้อมูลโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
2	เมนูด้านซ้าย	• รายงาน: วิเคราะห์ข้อมูลน้ำตาลกลูโคสที่บันทึกไว้ในระยะเวลาหนึ่ง และตรวจสอบสถานะน้ำตาลกลูโคสของคุณผ่านรายงาน • ตัวรับสัญญาณ: เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเพื่ออัปโหลดข้อมูลน้ำตาลกลูโคส • การตั้งค่าผู้ใช้: ดูข้อมูลโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล • การเชื่อมต่อ: จัดการรายชื่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เชื่อมต่อ • การสนับสนุน: ดูข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าประกาศ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา และการปฏิบัติตามข้อกำหนด • แบนเนอร์ทางลัด: ติดตั้งแอป Sens365 หรือทำการยืนยันตัวตนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อ	ชื่อ	คำอธิบาย
③	ส่วนด้านล่าง	• ทางลัดเว็บไซต์ i-SENS • ข้อกำหนดการใช้งาน • นโยบายความเป็นส่วนตัว • นโยบายคุกกี้ • ซอฟต์แวร์ Uploader • การตั้งค่าภาษา

3.3 การดูรายงาน

1 คลิก  รายงานที่เมนูด้านซ้ายบนเพื่อเข้าถึงหน้าจอรายงาน

2 ใช้ไอคอนที่ด้านบนของรายงานเพื่อดำเนินการฟังก์ชันต่อไปนี้




ข้อ	ชื่อ	คำอธิบาย
①	การตั้งค่าช่วงเป้าหมาย	เปลี่ยนช่วงน้ำตาลูกโลโก้เป้าหมายที่แสดงในรายงาน
②	ระยะเวลา	เปลี่ยนระยะเวลาที่แสดงในรายงาน
③		คัดลอกรายงาน AGP เป็นข้อความ
④		บันทึก พิมพ์ หรือส่งต่อเนื้อหาของรายงาน
⑤		ส่งออกเนื้อหารายงานเป็นไฟล์ Excel

3 ในหน้านี้ ให้คลิกรายงานต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวม, AGP, การเปรียบเทียบ, รูปแบบ, แนวโน้ม, สถิติ, เหตุการณ์

ภาพรวม

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดน้ำตาลกลูโคสและข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลอินซูลินและเซ็นเซอร์ สำหรับระยะเวลาที่เลือก

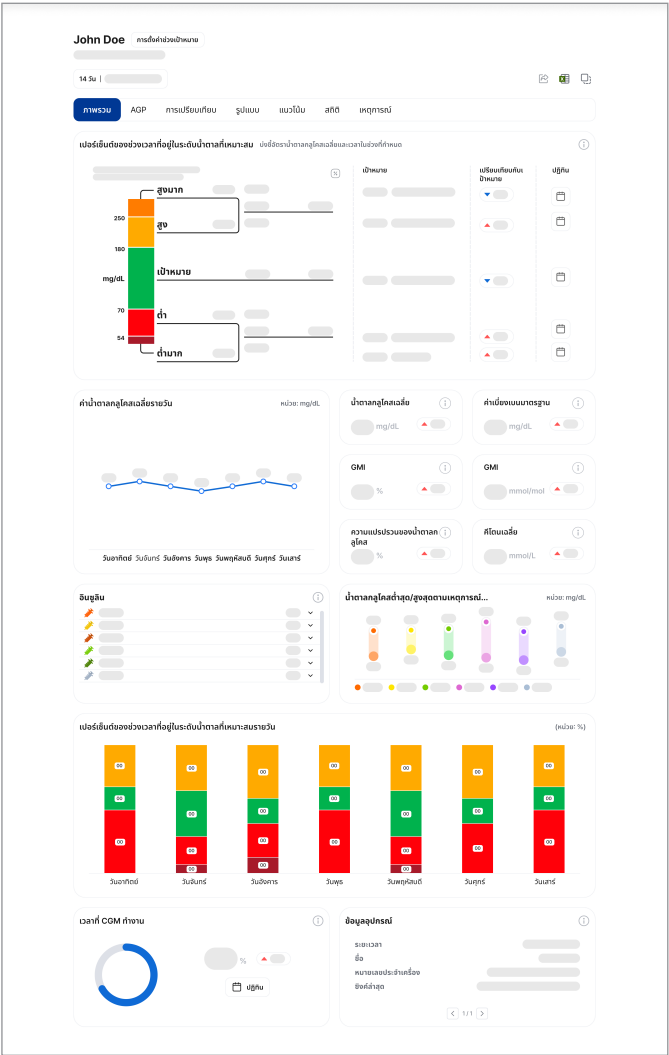


ชื่อ	คำอธิบาย
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่อยู่ในระดับน้ำตาลที่เหมาะสม	แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่น้ำตาลกลูโคสอยู่ในช่วงของน้ำตาลกลูโคสแต่ละช่วงที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่เลือก - เป้าหมาย: แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่น้ำตาลกลูโคสอยู่ในช่วงน้ำตาลกลูโคสเป้าหมาย - ต่ำ/ต่ำมาก: แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่น้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าหรือต่ำกว่าช่วงเป้าหมายมาก - สูง/สูงมาก: แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่น้ำตาลกลูโคสสูงกว่าหรือสูงกว่าช่วงเป้าหมายมาก
ค่าน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ยรายวัน	แสดงค่าน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ยในระยะเวลาที่เลือก โดยแยกตามวันของสัปดาห์
น้ำตาลกลูโคสเฉลี่ย	ค่าน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาที่เลือก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	ค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้นั้นเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ค่าที่ต่ำกว่าแสดงว่าระดับน้ำตาลกลูโคสยังคงรักษาให้อยู่ในระดับคงที่ได้
ตัวชี้วัดการจัดการน้ำตาลกลูโคส (GMI)	แสดงระดับฮีโมโกลบินไกลเคต (A1C) โดยประมาณ โดยอิงจากค่าน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาที่เลือก
ความแปรปรวนของระดับน้ำตาลกลูโคส	เปอร์เซ็นต์ (%) ที่คำนวณโดยการหารค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ย ซึ่งแสดงถึงระดับความแปรผันของน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้ในระยะเวลาที่เลือก
คีโตนเฉลี่ย	ค่าคีโตนเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาที่เลือก
อินซูลิน	แสดงปริมาณอินซูลินทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน โดยจำแนกตามประเภท
น้ำตาลกลูโคสต่ำสุด/สูงสุดตามเหตุการณ์ (อิงจากข้อมูลเครื่องวัดระดับน้ำตาลกลูโคส)	แสดงค่าน้ำตาลกลูโคสต่ำสุดและสูงสุดตามเหตุการณ์ภายในข้อมูลที่วัดได้จากเครื่องวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดส่วนบุคคล
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่อยู่ในระดับน้ำตาลที่เหมาะสมรายวัน	แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่อยู่ในระดับน้ำตาลที่เหมาะสม โดยแบ่งตามวันในสัปดาห์
เวลาที่ CGM ทำงาน	เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่รวบรวมข้อมูล CGM หารด้วยเวลาทั้งหมดของรายงาน
ข้อมูลอุปกรณ์	แสดงข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ในระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อ	คำอธิบาย
ดัชนีน้ำตาลกลูโคสคีโตน (GKI)	แสดงอัตราส่วนของระดับน้ำตาลกลูโคสต่อระดับคีโตนในระยะเวลาที่เลือก ดัชนีนี้ใช้เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน อาหารคีโตเจนิค เป็นต้น
มื้ออาหารเฉลี่ยรายวัน	แสดงปริมาณการบริโภคสารอาหารแต่ละชนิดเฉลี่ยต่อวันในระยะเวลาที่เลือก
การออกกำลังกายเฉลี่ยรายวัน	แสดงเวลาการออกกำลังกายเฉลี่ยรายวันสำหรับระยะเวลาที่เลือก โดยแบ่งตามความเข้มข้นของการออกกำลังกาย

AGP

รายงานสรุปข้อมูลน้ำตาลกลูโคสในช่วงเวลาที่ใช้ CGM (AGP) เป็นรายงานที่สรุปข้อมูลน้ำตาลกลูโคสที่รวบรวมในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลกลูโคสตลอดทั้งวัน คุณสามารถดูรายงาน AGP มาตรฐานสำหรับระยะเวลาที่เลือกได้

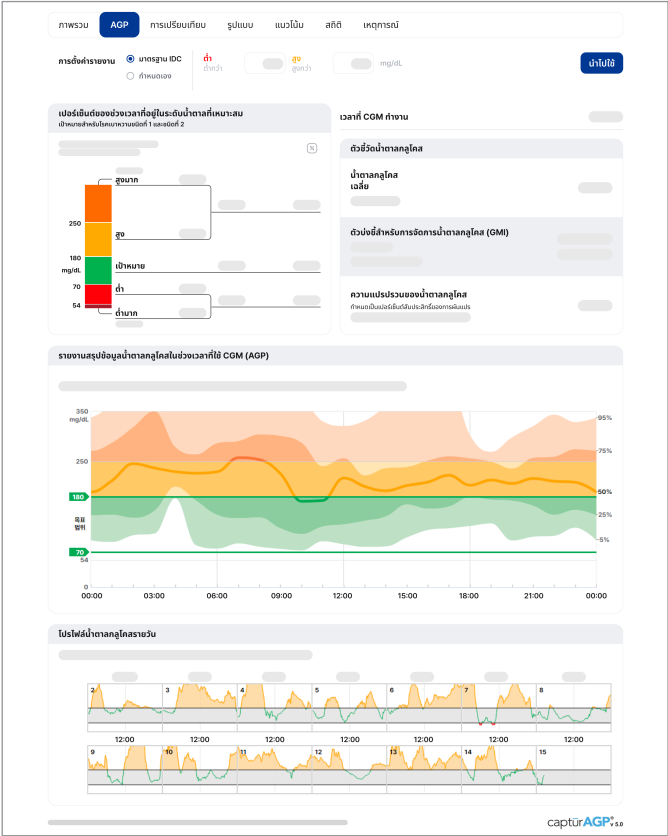


ชื่อ	คำอธิบาย
การตั้งค่ารายงาน	ตั้งค่าเกณฑ์ต่ำ/สูงตามมาตรฐานของ IDIC (International Diabetes Center) หรือตามการตั้งค่าของผู้ใช้เองก็ได้
รายงานสรุปข้อมูลน้ำตาลกลูโคสในช่วงเวลาที่ใช้ CGM (AGP)	ค่าน้ำตาลกลูโคสที่รวบรวมในระยะเวลาที่แสดงจะสรุปเป็นโปรไฟล์ 24 ชั่วโมง โดยแสดงค่ามัธยฐาน (50%) และช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์
โปรไฟล์ข้อมูลน้ำตาลกลูโคสรายวัน	แสดงระยะเวลาดังแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน

การเปรียบเทียบ


แผนภูมิสำหรับสองระยะเวลาจะแสดงข้างกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบรายงาน AGP ตามระยะเวลาได้

- การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่อยู่ในระดับน้ำตาลที่เหมาะสม
- การเปรียบเทียบตัวชี้วัดน้ำตาลกลูโคส (ความแปรปรวนของระดับน้ำตาลกลูโคส, SD, GMI, น้ำตาลกลูโคสเฉลี่ย)
- การเปรียบเทียบรายงานสรุปข้อมูลน้ำตาลกลูโคสในช่วงเวลาที่ใช้ CGM (AGP)

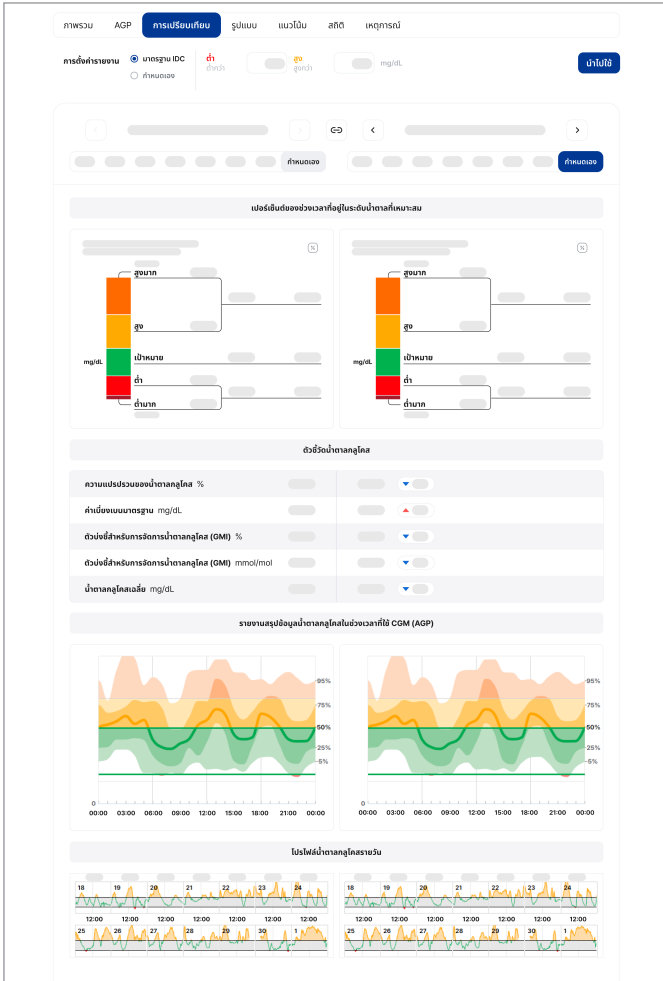


รูปแบบ

คุณสามารถดูแผนภูมิรายวันและข้อมูลเหตุการณ์สำหรับช่วงเวลาที่เกิด 'ต่ำ', 'เป้าหมาย' และ 'สูง' ในระยะเวลาที่เลือกได้

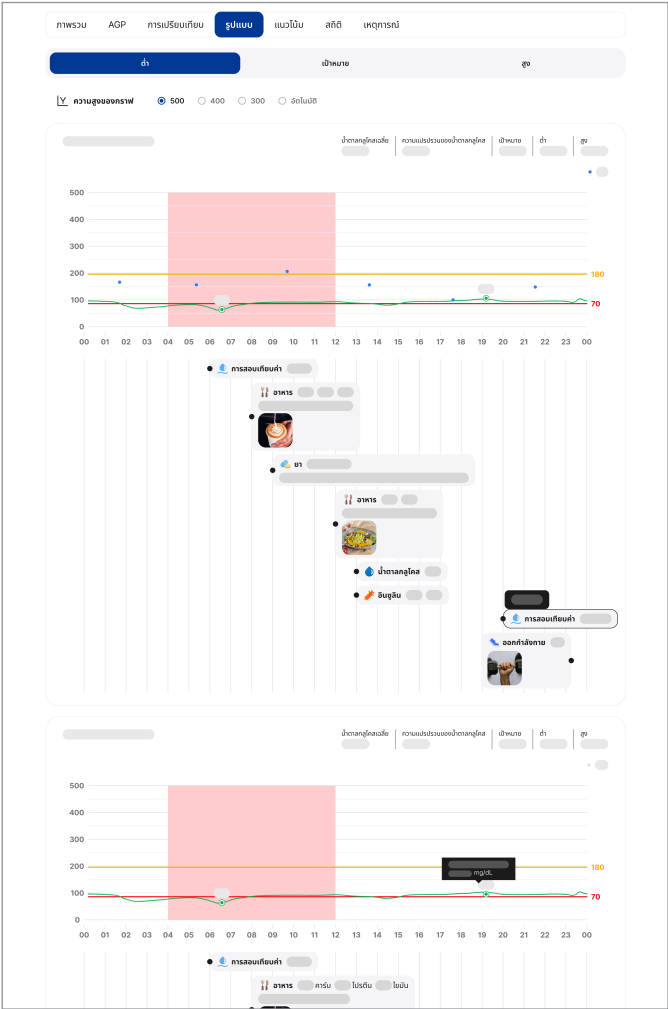

แนวโน้ม


คุณสามารถดูแนวโน้มรายวันและรายสัปดาห์สำหรับระยะเวลาที่เลือกได้ อีกทั้งยังแสดงข้อมูลเหตุการณ์ด้วย

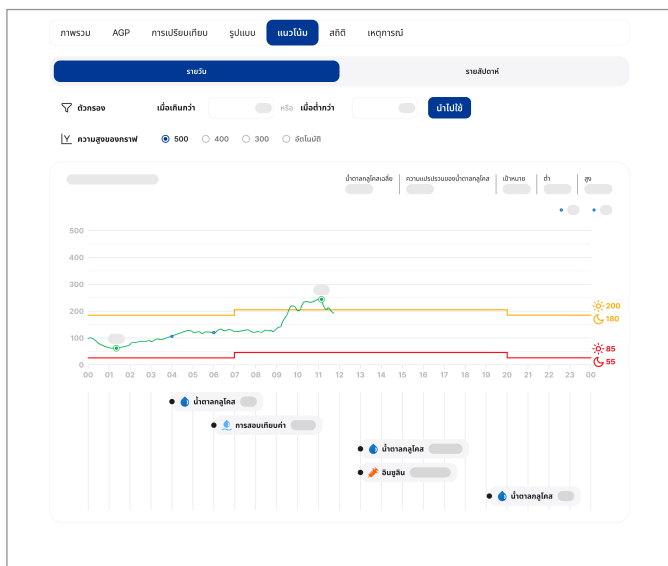

สถิติ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสำหรับระยะเวลาที่เลือกจะแสดงตามวันและตามชั่วโมง:

- เปอร์เซนต์ของเวลาที่อยู่ในระดับน้ำตาลที่เหมาะสม
- น้ำตาลกลูโคสเฉลี่ย
- ความแปรปรวนของระดับน้ำตาลกลูโคสเฉลี่ย
- เวลาที่ CGM ทำงานเฉลี่ย

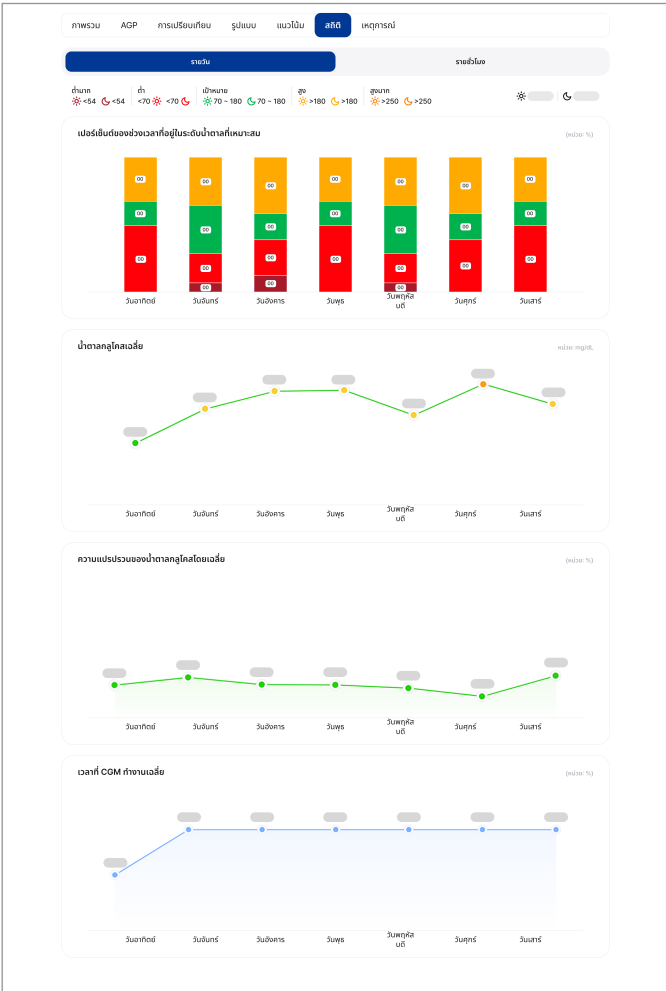


เหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ป้อนในระยะเวลาที่เลือกจะแสดงตามวันที่ และคุณกรองเพื่อดูเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องการได้

ภาพรวม	AGP	การเปรียบเทียบ	รูปแบบ	แนวโน้ม	สถิติ	เหตุการณ์
	ยา					
	ยา					
	น้ำตาลกลูโคส					
	จีนดูลิเบ					
	ยา					
	ฉีกทำเสียหาย					
	ยา					
	น้ำตาลกลูโคส					
	ยา					
	อาหาร					
	ยา					
	ยา					
	อาหาร					
	อาหาร					
	น้ำตาลกลูโคส					
	ยา					
	น้ำตาลกลูโคส					
	น้ำตาลกลูโคส					
	น้ำตาลกลูโคส					
	น้ำตาลกลูโคส					

การจัดการบัญชี i-SENS


หากต้องการจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิกไปยังการตั้งค่าบัญชี i-SENS บนหน้าจอ 'โปรไฟล์'

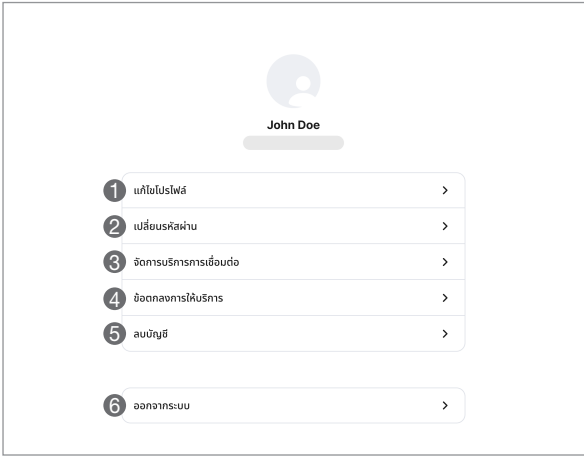

ข้อ	ชื่อ	คำอธิบาย
❶	แก้ไขโปรไฟล์	ดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนระหว่างการลงทะเบียน
❷	เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นรหัสใหม่
❸	จัดการบริการการเชื่อมต่อ	ดูและยกเลิกการเชื่อมต่อบริการกับบัญชีปัจจุบัน
❹	ขอดกเลิกการให้บริการ	ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและนโยบาย
❺	ลบบัญชี	เมื่อคุณลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลน้ำตาลกลูโคสด้วย
❻	ออกจากระบบ	ออกจากระบบบัญชีและบริการ i-SENS

การจัดการผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพได้โดยการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ หากต้องการหยุดแชร์ข้อมูล คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อหยุดการแชร์ข้อมูลได้

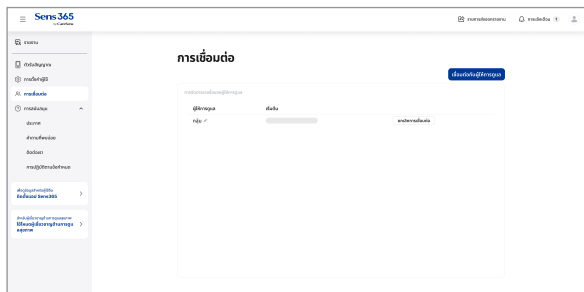

การเชื่อมต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ


- 1 การคลิกการเชื่อมต่อ จะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้รับข้อมูลที่คุณแชร์
- 2 หากต้องการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพรายใหม่ ให้คลิกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
- 3 ป้อนรหัสการแชร์ของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่จะรับข้อมูล แล้วคลิกตกลง
- 4 หลังจากป้อนรหัสการแชร์แล้ว คุณต้องยินยอมให้มีการจัดหาข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ โปรดยอมรับรายการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 5 หากรหัสการแชร์ที่ป้อนถูกต้อง ระบบจะเพิ่มกลุ่มนั้นเข้าไปในรายชื่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

- 1 หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เชื่อมต่ออยู่ ให้คลิก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ**
- 2 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปยืนยันการยกเลิกการแชร์ปรากฏขึ้น ให้คลิก **ตกลง** การแชร์กับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก


การเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณกับพีซี

- 1 หากต้องการเชื่อมต่อ Sens365 กับตัวรับสัญญาณ CareSens Air ให้เลือกตัวรับสัญญาณจากเมนูด้านซ้าย
 - สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ให้คลิกซอฟต์แวร์ **Uploader** ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ Sens365 (ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ จะใช้ได้เฉพาะพีเจอาร์อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวรับสัญญาณเท่านั้น)
- 2 หากไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ผู้อัปโหลดไว้บนพีซีของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกรีเฟรชทางด้านขวา
- 3 หากตัวรับสัญญาณ CareSens Air ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับพีซี โปรดเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ CareSens Air กับพีซีตามคำแนะนำหน้าจอ เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกตกลงที่ด้านล่างขวา

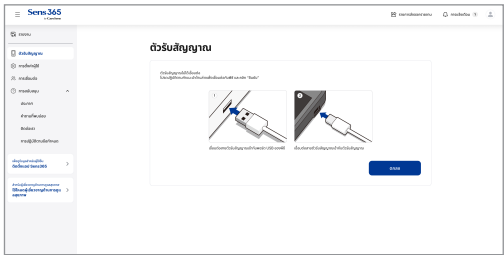

ทำความเข้าใจหน้าจอต้อนรับสัญญาณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายหน้าจอที่แสดงเมื่อเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ CareSens Air กับพีซีและติดตั้งซอฟต์แวร์ผู้อัปโหลดแล้ว

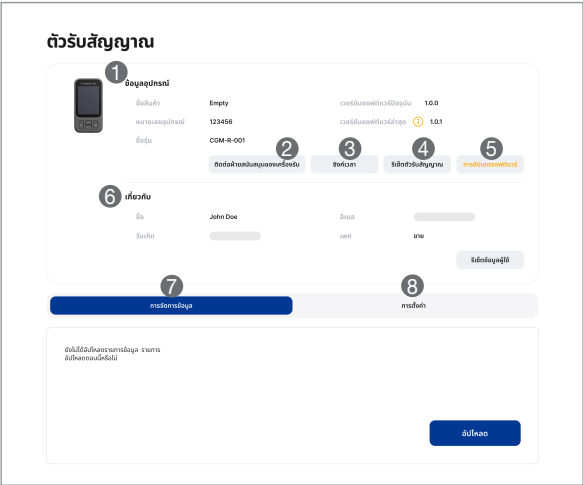

ข้อ	ชื่อ	คำอธิบาย
1	ข้อมูลอุปกรณ์	แสดงข้อมูลตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่อ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขประจำเครื่อง ชื่อรุ่น และเวอร์ชันซอฟต์แวร์
2	ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของตัวรับสัญญาณ	ทำการสอบถาม หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยขณะใช้งานตัวรับสัญญาณ เมื่อทำการสอบถาม คุณสามารถส่งข้อมูลบันทึกจากตัวรับที่เชื่อมต่ออยู่ได้
3	ซิงค์เวลา	ซิงโครไนซ์เวลาของตัวรับสัญญาณกับเวลาของพีซี
4	รีเซ็ตตัวรับสัญญาณ	รีเซ็ตตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่
5	การอัปเดตซอฟต์แวร์	- อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด - ปุ่มนี้จะแสดงขึ้น หากซอฟต์แวร์ของตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด
6	เกี่ยวกับ	แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่กำหนด
7	การจัดการข้อมูล	อัปโหลดข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในตัวรับสัญญาณไปยังเว็บ Sens365
8	การตั้งค่า	ตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าทั่วไป (ภาษา รูปแบบวันที่ รูปแบบเวลา ฯลฯ) และการตั้งค่าการแจ้งเตือน

การสำรวจฟังก์ชันตัวรับสัญญาณ

การอัปเดตข้อมูลของตัวรับสัญญาณ

- 1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ของตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่บนหน้าจอ 'ตัวรับสัญญาณ' หากยังไม่ได้กำหนดผู้ใช้ ให้คลิกเลือกผู้ใช้เพื่อกำหนดผู้ใช้
 - สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โปรดดูที่ '4.6 การเลือกผู้ใช้ตัวรับสัญญาณ'
- 2 คลิกแท็บจัดการข้อมูล
 - ในแท็บจัดการข้อมูล จะแสดงจำนวนบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในตัวรับสัญญาณ CareSens Air
- 3 คลิกอัปเดตที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่ออัปเดตข้อมูลของตัวรับสัญญาณ CareSens Air ไปยังเว็บ Sens365



หมายเหตุ

แท็บจัดการข้อมูล จะปรากฏขึ้นแก่ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของตัวรับสัญญาณ

- 1 หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยขณะใช้งานตัวรับสัญญาณ โปรดคลิกติดต่อฝ่ายสนับสนุนของตัวรับสัญญาณ
 - ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกผู้ใช้สำหรับตัวรับสัญญาณแล้วเท่านั้น
- 2 หลังจากเขียนหัวเรื่องและเนื้อหาเสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบช่องส่งข้อมูลบันทึกสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 - การส่งข้อมูลบันทึกของตัวรับสัญญาณดำเนินการได้ผ่านติดต่อฝ่ายสนับสนุนของตัวรับสัญญาณ
- 3 คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อส่งคำถาม

4 การใช้เว็บ Sens365 (ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ดูแลสุขภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตรวจสอบข้อมูลน้ำตาลกลูโคสที่ผู้ใช้เซ็นเซอร์ส่งมาผ่านเว็บ Sens365 ได้ หากต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้เชี่ยวชาญบนเว็บ Sens365 จะต้องทำการยืนยันตัวตนในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว พี่เจอรต่อไปนี้จะช่วยให้การจัดการข้อมูลปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


บทนี้จะช่วยให้คุณ:

1. ทรายชื่อผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อและรายงานของผู้ใช้
2. จัดการกลุ่มผู้ใช้เซ็นเซอร์และผู้ใช้บริการดูแลสุขภาพ

4.1 การเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ

การยืนยันตัวตนของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

- 1 หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่แบนเนอร์ใหม่ดผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้าย

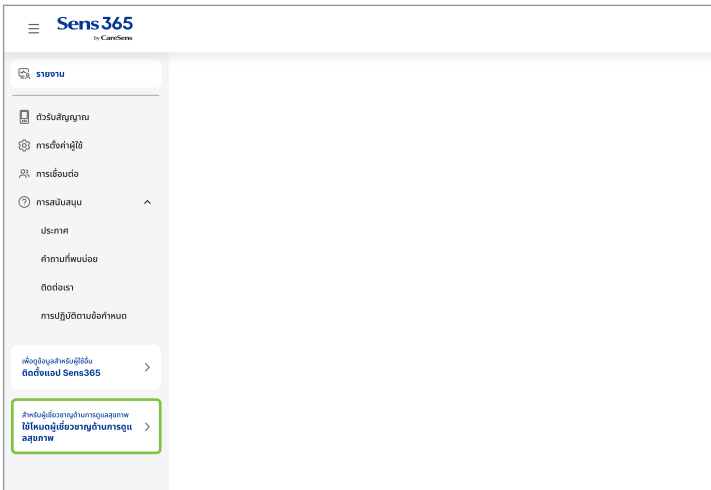

- 2 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปส่งคำขอการยืนยันตัวตนของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อของคุณ ชื่อโรงพยาบาล และแผนก

3 หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว ให้คลิกส่งอีเมลคำขอเพื่อร้องขอการยืนยันตัวตน

 คำขอการตรวจสอบจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ประเทศ/
ภูมิภาคที่อาศัยอยู่

* ชื่อ อีเมล


* ชื่อโรงพยาบาล * แผนกอายุรเวช

4 เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะส่งอีเมลและการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

5 หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ให้เชื่อมต่อกับเว็บ Sens365 อีกครั้ง หรือคลิกใช้งานเลยในการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้เชี่ยวชาญ

4.3 ทำความเข้าใจหน้าจอกลุ่ม

การเลือกกลุ่มจากเมนูด้านซ้ายจะแสดงรายชื่อผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับกลุ่มดังกล่าว

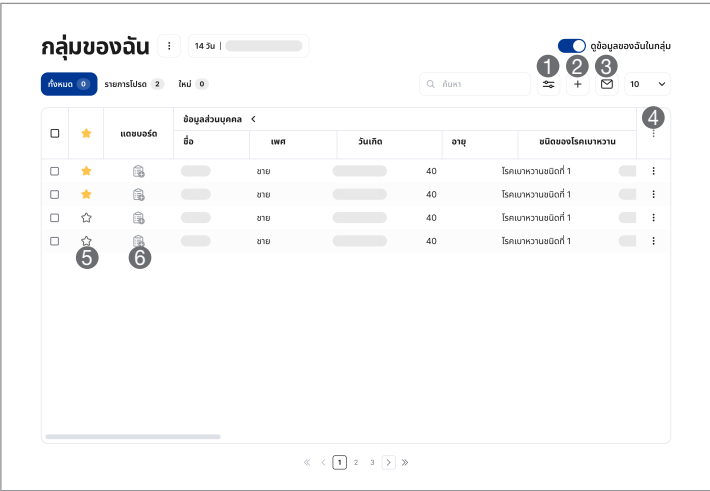

ข้อ	ไอคอน	คำอธิบาย
1		ใช้ตัวกรองกับรายการ
2		เพิ่มผู้ใช้เซ็นเซอร์โดยใช้รหัสการแชร์ที่ได้รับ
3		เชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์โดยการส่งรหัสการแชร์ของกลุ่ม
4		แก้ไขข้อมูลที่แสดงในรายการ
5		เพิ่มผู้ใช้เซ็นเซอร์ไปยังรายการโปรดของคุณ ดูผู้ใช้ที่เป็นรายการโปรดทั้งหมดได้ในแท็บรายการโปรด
6		เพิ่มผู้ใช้เซ็นเซอร์ไปยังแดชบอร์ด ดูรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่มได้โดยการคลิกที่แดชบอร์ดบริเวณด้านบน

4.4 การจัดการกลุ่ม

การเพิ่มกลุ่ม

- 1 คลิก : ในรายชื่อกลุ่มบนเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกเพิ่มกลุ่ม
- 2 ป้อนชื่อของกลุ่มที่ต้องการเพิ่ม
- 3 ระบบจะสร้างกลุ่มพร้อมชื่อที่ป้อน

การเชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์

- 1 หากต้องการเชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์เข้าร่วมกลุ่ม ให้คลิก : ที่ด้านขวาของชื่อกลุ่ม แล้วเลือกเชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์
- 2 หากหน้าต่างป๊อปอัปเชิญผู้ใช้เซ็นเซอร์ปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อกลุ่มที่จะแสดงต่อผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่ได้รับเชิญ จากนั้นคลิกถัดไป
- 3 ตรวจสอบรหัสการแชร์ที่สร้างขึ้นแล้วคลิกส่งคำเชิญทางอีเมล
- 4 สำหรับคำเชิญทางอีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่ต้องการเชิญ แล้วคลิกส่ง คุณสามารถส่งอีเมลได้สูงสุด 10 รายการพร้อมกัน

การเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

- 1 หากต้องการเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเข้าร่วมกลุ่ม ให้คลิก : ของกลุ่มแล้วเลือกเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
- 2 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพปรากฏขึ้น ให้ป้อนอีเมลบัญชี Sens365 ของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ต้องการเชิญ และเลือกสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ให้บริการรายดังกล่าว
- 3 ตรวจสอบข้อความที่ด้านล่างของหน้าต่างป๊อปอัปเชิญผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ แล้วคลิกเชิญ

4.5 การดูรายงานผู้ใช้เซ็นเซอร์

1 หากคุณเลือกผู้ใช้เซ็นเซอร์ในกลุ่ม คุณจะดูรายงานของผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่เลือกได้



2 คุณสามารถดูข้อมูลผู้ใช้ เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ชนิดของโรคเบาหวาน หมายเลขประจำตัว และผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย

3 คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำตาลกลูโคสล่าสุดได้จากเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้

4 คลิก เพื่อจ่ายใบสั่งยาสำหรับรายงานฉบับนี้

5 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการดูรายงาน โปรดดูที่ '3.3 การดูรายงาน'

4.6 การเลือกผู้ใช้ตัวรับสัญญาณ

หากต้องการจัดการข้อมูลตัวรับสัญญาณ จำเป็นต้องกำหนดผู้ใช้งาน

ตัวรับสัญญาณ



ข้อมูลอุปกรณ์

ชื่อสินค้า Empty

หมายเลขอุปกรณ์ 123456

ชื่อรุ่น COM-R-001

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบัน 1.0.0

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุด 1.0.1

ปิดเวลา

รีเซ็ตตัวรับสัญญาณ

การนำออกจอฟต์แวร์

เกี่ยวกับ

ไม่มีข้อมูล

แสดงผู้ใช้

การดำเนินการ

การตั้งค่า

ไม่มีข้อมูล

โปรดเลือกผู้ใช้งานหรือดำเนินการตั้งค่าก่อน

- 1 **คลิกเลือกผู้ใช้** บนหน้าจอ 'ตัวรับสัญญาณ'
ดูที่ '3.5 การเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ' สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ
- 2 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้น คุณจะเลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกให้เป็นตัวรับสัญญาณจากผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในกลุ่มได้

ภาคผนวก A นโยบาย บัญชีที่ไม่ใช้งาน

นโยบายบัญชีที่ Sens365 ไม่ใช้งาน

Sens365 จะแปลงผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลา 1 ปี ให้เป็นบัญชีที่ไม่ใช้งาน ในระหว่างกระบวนการนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดเก็บแยกต่างหากและได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้แยกต่างหากจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 ปี และอาจถูกทำลายได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

i-SENS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เลิกใช้บัญชีที่กำหนด และรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการจัดเก็บไว้แยกต่างหากแก่สมาชิกที่กำหนดการเลิกใช้บัญชีไว้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น อีเมล อย่างน้อย 30 วันก่อนการแปลง

หากคุณไม่ต้องการให้บัญชีถูกแปลงเป็นสถานะไม่ใช้งาน โปรดเข้าสู่ระบบบริการก่อนที่จะเกิดการแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังไม่ถูกทำลายหลังจากการแปลงเป็นบัญชีที่ไม่ใช้งาน คุณสามารถเข้าสู่ระบบ ให้ความยินยอม กู้คืนบัญชีของคุณที่ไม่ใช้งานและใช้บริการต่อไปได้ตามปกติ

การคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้เซ็นเซอร์

- ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่จัดเก็บไว้ใน Sens365 จะได้รับการเข้ารหัสในระหว่างการส่งข้อมูล โปรโตคอลการเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL) จะช่วยให้มั่นใจในการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล ป้องกันการดักฟังและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- ระบบจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้เซ็นเซอร์ที่เพิ่มเข้าไปในกลุ่ม เพื่อให้เฉพาะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลได้

ภาคผนวก B ข้อมูลทางเทคนิค

B.1 ประสิทธิภาพ

เว็บเบราว์เซอร์: HS-FE-01

ชื่อผลิตภัณฑ์	Sens365
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้	ระบบตรวจวัดน้ำตาลกลูโคสอย่างต่อเนื่อง CareSens Air
สภาพแวดล้อมการสื่อสาร	โปรโตคอลการสื่อสาร: HTTPS
สภาพแวดล้อมการทำงาน	• เบราร์เซอร์ที่แนะนำ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari • เวอร์ชัน OS (ระบบปฏิบัติการ): Windows 10 หรือใหม่กว่า, Mac OS 11 หรือใหม่กว่า • ความละเอียด: 1280 x 800 px หรือสูงกว่า
ข้อมูลที่ส่งและรับ	• ค่าน้ำตาลกลูโคสอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้ ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน (อาหาร อินซูลิน การออกกำลังกาย ฯลฯ) • สถิติและรายงานข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงน้ำตาลกลูโคสของผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้
ประสิทธิภาพที่สำคัญ	• ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง สถาบันทางการแพทย์) ที่ใช้แอปสามารถรับข้อมูลที่แชร์ได้โดยการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้ • แสดงสถิติข้อมูลของผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้และบันทึกรายงาน • แสดงค่าน้ำตาลกลูโคสอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ากันได้และข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
เวอร์ชันซอฟต์แวร์	เวอร์ชัน: 1.1.x

B.2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือแอนตี้ไวรัสบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Windows หรือ Mac OS เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่เป็นอันตรายเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ได้
 - หากคุณไม่ได้รับข้อมูลน้ำตาลกลูโคสจากผู้ใช้นั้นเซอร์ แม้ว่าจะป้อนรหัสการแชร์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสการแชร์หลักที่ถูกต้อง หากปัญหาเดิมยังคงอยู่ แม้ว่าจะป้อนรหัสการแชร์ที่ถูกต้องแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ caresensair.com
 - หากคุณถูกออกจากระบบเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องอื่นพยายามเข้าสู่ระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านหากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ
 - หากคุณป้อนรหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
 - หากคุณไม่ได้ใช้งานบัญชีเป็นเวลาานกว่า 1 ปี ระบบจะปิดใช้งานบัญชี หากระบบปิดใช้งานบัญชีของคุณ จะต้องเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 - หากเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Sens365 ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุด
 - เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเมื่อใช้ Sens365 ของคุณ โปรดใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ (เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงาน) หรือการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่านบริการ VPN ที่มีความน่าเชื่อถือ
- หลีกเลี่ยงการใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงเครือข่ายสำหรับผู้มาเยือนในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน ร้านอาหาร โรงเรียน ห้องสมุด โรงแรม สนามบิน หรือบนเครื่องบิน เครือข่ายเหล่านี้อาจไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ และอาจทำให้ Sens365 ของคุณเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น มัลแวร์หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

- ระบบจะออกโทเค็นให้แก่ผู้ใช้เมื่อตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ถูกต้อง
- สำหรับค่าขอแต่ละรายการ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของโทเค็น แล้วจะดำเนินการยืนยันตัวตน
- วิธีการสื่อสาร SSL ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล
- ระบบจะใช้ AES ในการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล

i·sens



i-SENS, Inc.

43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com



**Medical Technology Promedt
Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany

© 2026 i-SENS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
PCGAA-000077 REV0 2026-08

